


Brevi istruzioni per l'uso


- ① **Tasto di regolazione del numero di giri motore:** avviare il motore / aumentare il numero di giri.
- ② **Pulsante refrigerante:** per il tasto refrigerante è possibile impostare 2 modalità di funzionamento. A seconda della modalità di funzionamento impostata il pulsante refrigerante ha le seguenti funzioni:
Premere brevemente - attivare/disattivare la portata del refrigerante *oppure* premere brevemente - regolare la portata del refrigerante da 0 a 110 ml/s (4 livelli).
- ③ **Tasto programma:** premere brevemente - fase programma avanti.
Premere a lungo - fase programma indietro.
- ④ **Tasto senso di rotazione del motore:** regolare il senso di rotazione del motore.

Premere a lungo - attivare la funzione di lavaggio.

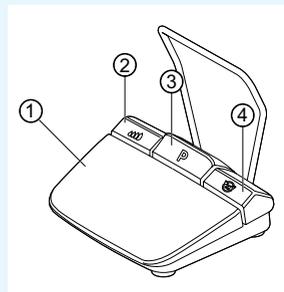

Collegare il kit del tubo

1. Chiudere la fascetta del tubo ⑦.
2. Fissare il tubo del refrigerante ① al manipolo o contrangolo.
3. Fissare bene le clip ② al condotto del motore.
4. Far scattare l'adattatore del tubo ③ in posizione.
5. Inserire il tubo nella pompa (circa 1 cm di distanza tra il connettore e l'ingresso della pompa ④ e bloccare la pompa).
6. Inserire l'ago d'iniezione ⑥.
7. Aprire la fascetta del tubo ⑦.

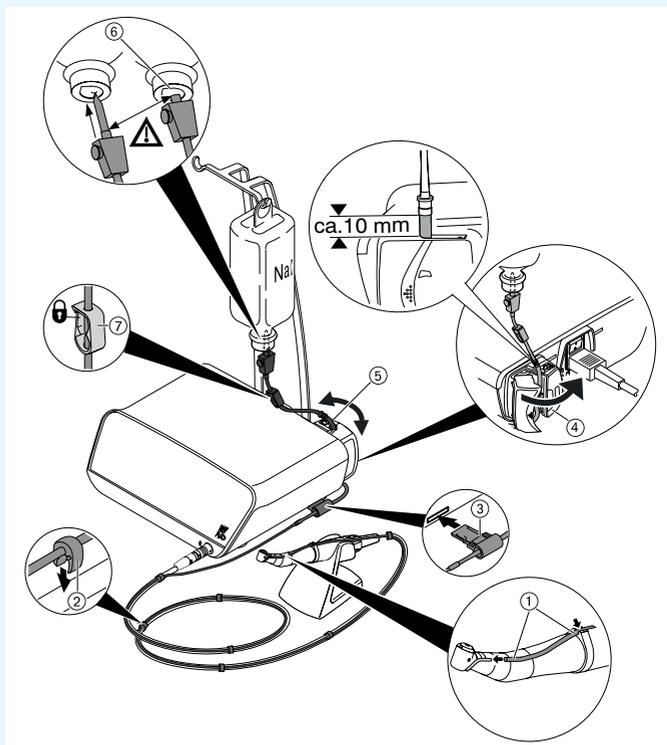

Nota


Solo in caso di bottiglie di vetro aprire la ventilazione sull'ago di iniezione ⑥.



ATTENZIONE

Queste istruzioni per l'uso in breve descrivono unicamente le funzioni principali. Prima della messa in funzione e in caso di utilizzo da parte di persone che non hanno familiarità con questo prodotto medicale, è importante rispettare le istruzioni per l'uso accluse alla consegna.



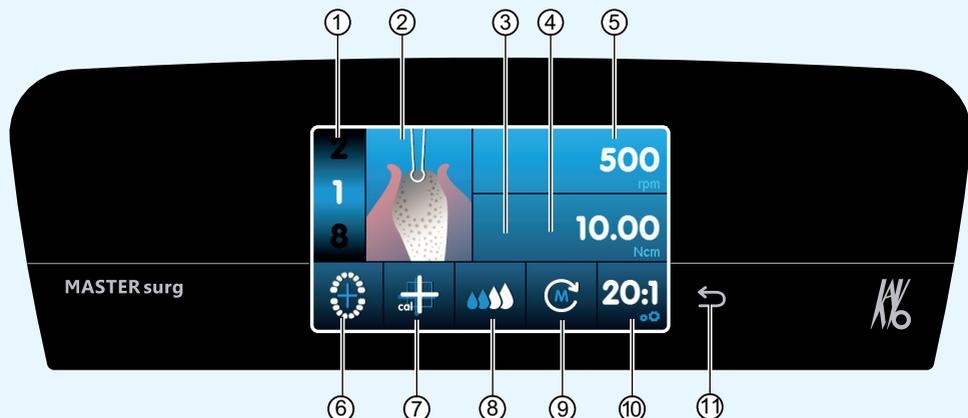

- | | |
|--|---|
| ① Fase di programma (1 a max. 10) | ⑦ Attivazione calibrazione One-Touch |
| ② Visualizzazione delle attività | ⑧ Impostazione della portata del refrigerante |
| ③ Coppia massima raggiunta
(non viene visualizzata con tutte le attività) | ⑨ Senso di rotazione del motore |
| ④ Limitazione di coppia | ⑩ Moltiplicatore |
| ⑤ Numero di giri | ⑪ Tasto indietro |
| ⑥ Indicatore di stato reostato a pedale senza fili /
Inserimento posizione impianto | |

Modifica dei parametri e delle attività

Selezione della regolazione dell'apparecchio

Premere brevemente il tasto indietro ⑪ per raggiungere il programma di chirurgia o la selezione del programma. Premere a lungo, per richiamare le impostazioni del dispositivo.



Selezione o modifica dei parametri o delle attività

Funzioni ④ e ⑤: modificabili spingendo il regolatore verso destra o sinistra, o toccando i simboli +/-.

Funzioni ①, ③, ⑨ e ⑩: direttamente modificabile tramite tocco.

Funzioni ②, ⑥ e ⑦: modificabili all'interno della finestra di dialogo apparsa.

La memorizzazione avviene automaticamente quando si esce dal parametro o dall'attività.

Limitazione del numero delle fasi di programma

Toccare la fase di programma dopo l'ultima attività selezionata e selezionare il simbolo della bandiera.



Deselezione della limitazione delle fasi di programma

Selezionare la fase di programma con simbolo della bandiera e assegnare nuove attività.

Visualizzazione della coppia e documentazione

Solo in caso di funzione di documentazione attivata la coppia verrà visualizzata come grafico nell'attività „Inserimento impianto” e salvata sulla scheda SD.

