


KaVo QUATTROcare PLUS

Dobrá péče se vyplatí.

Prodlužte životnost svých nástrojů
a ušetřete za opravy

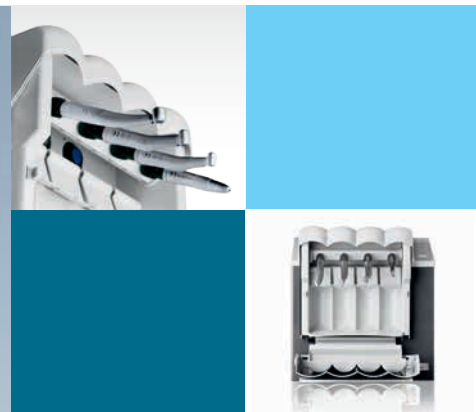

KaVo. Dental Excellence.

Čtyřikrát perfektní péče. Rychlá a pohodlná.

Tak jednoduché používání.

V běžném pracovním dni je tak málo času na dokonalou péči o Vaše nástroje. O to důležitější je možnost spolehnout se na promyšlený systém péče, který vše vyřeší za Vás. Systém, který nejenom dodrží všechny pracovní postupy a zaručí tak dokonalou údržbu a čištění, ale který se také dá intuitivně a rychle obsluhovat. Nasadíte nástroje. Zavřete čelní kryt. Spustíte. Čtyři najednou. Hotovo obratem ruky.

Čtyři nástroje za jednu minutu.

Jednoduše stiskem tlačítka. Plně automatický KaVo QUATTROcare PLUS nabízí nejvyšší možnou rychlost a uživatelsky přátelskou obsluhu. Dále se KaVo QUATTROcare PLUS vyznačuje tou nejjednodušší manipulací. Na čtyři ošetřovací spojky nasadíte až čtyři nástroje najednou, zavřete čelní kryt a spustíte program. Kompletní proces péče trvá pro čtyři nástroje pouhou 1 minutu. Poté je QUATTROcare PLUS ihned připraven na další cyklus.

Je to takhle jednoduché.

Pracovní kroky s KaVo QUATTROcare PLUS.

- 1 Nasadíte nástroje. K nasazení nástrojů slouží ošetřovací spojka MULTIflex a tři spojky INTRAmatic.
- 2 Zavřete čelní kryt. A teď to může začít.
- 3 Stiskněte spouštěcí tlačítko. Plně automatické vnitřní čištění a péče až o čtyři nástroje trvá jen 1 minutu.
- 4 Hotovo. Vyměňte nástroje.



jenom
minuta

Přednosti a výhody:

- Žádné chyby při obsluze díky jednoduché a bezpečné manipulaci
- Jistota kvality provedené péče díky automatickému průběhu programu
- Nástroje jsou rychle k dispozici díky krátkému trvání cyklu



Optimální péče.

Rozdíl je v detailech.

Díky napěnění čistících komponent ošetřovacího spreje KaVo QUATTROcare se rozpustí anorganické zbytky uvnitř nástrojů, tlakem vzduchu se vyfouknou a tím se vytvoří předpoklady pro optimální ošetření olejem.

Pokud však chcete z vnitřku nástrojů odstranit i proteiny, je zapotřebí předchozí intenzivní čištění pomocí KaVo CLEAN a DRYspray. Rychlost KaVo QUATTROcare PLUS ulehčuje nejen chod Vaší praxe, ale navíc Vám dává i jistotu perfektní péče. Životnost Vašich nástrojů Vám bude poděkováním.

Díky dávkovací automatice je zajištěno, že každý nástroj bude ošetřen množstvím oleje požadovaným pro daný typ. Tím se vyvarujete nadměrné spotřeby ošetřovacího oleje a zajistíte optimální chod nástrojů. KaVo QUATTROcare PLUS je univerzální. To znamená: s KaVo QUATTROcare PLUS můžete ošetřit nejen své vysoce kvalitní nástroje KaVo, ale i nástroje všech běžných výrobců.

Důsledně efektivní péče.

Dlouhá životnost nástrojů není jen otázkou kvality a jejich ceny, ale především péče o ně. KaVo svým systémem péče QUATTROcare stanovil celosvětový standard efektivity péče o nástroje. Inovativní systém péče KaVo QUATTROcare PLUS je nesrovnatelně důkladný, úsporný a snadno obsluhovatelný. Perfektní pro všechny nástroje, které jsou v praxi pravidelně používány.

KaVo QUATTROcare PLUS je standardně vybaven inovativní funkcí Purging. Při ní se navíc ostříkají a profouknou převodové a sprejové kanálky, takže případné přebytečné zbytky oleje zmizí a nástroje KaVo jsou tak ošetřeny až do posledního detailu.

Integrovaný program – péče o upínací kleštiny.

Každodenní čištění a péče o upínací kleštiny Vašich nástrojů zajišťuje nejen dlouhou životnost, ale také sílu a jistotu držení.

1. Adaptér péče o upínací kleštiny nasadíte na spojky MULTiflex
2. Upínací kleštiny nasadíte na adaptér
3. Stisknete tlačítko programu pro údržbu upínacích kleštin



Efekt péče KaVo QUATTROcare-účinná expanze spreje KaVo QUATTROcare plus uvnitř nástrojů uvolňuje a odstraňuje organická rezidua.

Efektivita v praxi. KaVo-SUPERtorque LUX 650 B, ošetřováno KaVo QUATTROcare. Sedm let v každodenním nasazení bez výpadků nebo výměn a oprav. Vždy optimálně ošetřeno = vždy připraveno k použití.



EXCELETNÍ

Přednosti a výhody:

- Optimální péče díky ošetřovacímu spreji KaVo QUATTROcare plus
- Vysoká efektivita díky perfektní koordinaci s každodenními nároky praxe



Příznivé při koupi.
Úsporné při používání.



Přednosti jsou jasné.

Kladete důraz na nástroje špičkové kvality. KaVo QUATTROcare PLUS se stará o to, aby Vaše nástroje neztratily nic ze své přesnosti ani hodnoty. Jen s dokonale ošetřenými a následně hygienicky připravenými nástroji můžete trvale šetřit náklady a dosahovat perfektních výsledků.

Dávkovací automatika jednoduše rozezná obsazení jednotlivých míst a zaručí přesné nutné dávkování ošetřovacího spreje KaVo QUATTROcare plus do každého z nich. Nedochází tak k nadměrné spotřebě spreje a vyhnete se zbytečným nákladům.

Přednosti a výhody:

- Cyklus ošetření čtyř nástrojů trvá jen jednu minutu
- Řízeno programem, automatický průběh ošetření
- Optimální ošetření olejem díky dávkovací automatice
- Jednoduchá manipulace brání chybám v ošetření
- Vyfoukání převodových a sprejových kanálků díky funkci Purging
- Po ošetření nevystupují z nástrojů zbytky oleje
- Základní osazení čtyřmi ošetřovacími spojkami (1 x MULTIflex / 3 x INTRAMatic)
- Univerzální použitelnost (k dispozici adaptéry pro všechny běžné typy nástrojů)
- Moderní a ergonomický design

KaVo QUATTROcare PLUS:
jednoduchý - univerzální - úsporný.

RYCHLOST
+
SPOLEHLIVOST
=



Technická data

Rozměry:

Šířka	35 cm
Hloubka	28 cm
Výška	38 cm

Technická data:

Hmotnost	10 kg
Síťové napětí	100 – 240 V
Kmitočet sítě	50 – 60 Hz
Příkon	cca. 24 W
Přípojka stlačeného vzduchu	4 – 6 bar
Spotřeba stlačeného vzduchu	ca. 50 NI/min

Instalační podmínky:

- dobré větrání místnosti
- bez přímého slunečního osvětlení



Doplňky

Produkt	Č. mat.	Produkt	Č. mat.
Ošetřovací spojka INTRAmatic	1.009.6143	Ošetřovací spojka YOSHIDA pro turbíny se světlem	1.000.7403
Ošetřovací spojka MULTIflex	1.009.6142	Ošetřovací spojka YOSHIDA pro turbíny beze světla	1.000.7585
Ošetřovací spojka hlavičky	0.411.7941	Ošetřovací spojka MIDWEST Low Speed	1.000.8459
Ošetřovací spojka COMFORTdrive	1.005.1707	Ošetřovací spojka NSK pro turbíny	1.000.8786
Ošetřovací adaptér SIRONA TE nástroje	1.000.1003	Ošetřovací spojka OSADA pro turbíny	1.000.8858
Ošetřovací spojka SIRONA T1 pro turbíny	1.000.7156	Ošetřovací spojka lem 2 otvory	1.002.1217
Ošetřovací spojka BIEN-AIR	1.001.7860	QUATTROcare Plus sprej (balení 6 ks)	1.005.4525
Ošetřovací spojka W&H	1.001.7888		



KaVo. Dental Excellence.