

Universal Opaque

LICHTHÄRTENDE PASTENOPAKER FÜR CERAMAGE UND SOLIDEX



Zwei Kompositsysteme – Ein Opaker-Konzept



Implantatarbeit und Bilddokumentationen von Uwe Gehringer u. Clemens Bieber, München

- **Universell anwendbar**

Universal Opaque ist die neue Pastenopaker-Generation für die CERAMAGE und SOLIDEX Systeme.

- **Leicht und schnell aufzutragen**

Durch die verbesserten thixotropen Eigenschaften sind die Pasten jetzt wesentlich softer und fließfähiger. Sie lassen sich äußerst leicht und schnell auftragen.

- **Hohe Deckkraft und beständige Haftung**

Speziell abgestimmte Mikrofüller bilden eine extrem feine Partikelverteilung, die eine optimierte Deckkraft mit einer vergleichbar herausragenden und beständigen Haftung zur Legierung verbindet.

- **Bemerkenswert einfach**



Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque fließt bereits beim ersten Auftragen in alle Retentionsbereiche des Gerüsts und ist Bestandteil des Verbundsystems. Die besonderen Polymerisationseigenschaften führen auch in Unterschnitten zu einer vollständigen Aushärtung.

1. Opaker-Auftrag

Das anschließende Auftragen der deckenden Universal Opaker erfolgt durch die softe Viskosität leicht und gleichmäßig. Bereits die erste dünne Farbschicht erreicht eine äußerst deckende und homogene Farbbasis.

2. Opaker-Auftrag



Mit dem zweiten Opaker-Auftrag ist das Gerüst gleichmäßig entsprechend der gewünschten Farbgrundiert.

Von Grund auf der richtige Farbton


Whitening-Farben



V-Farben

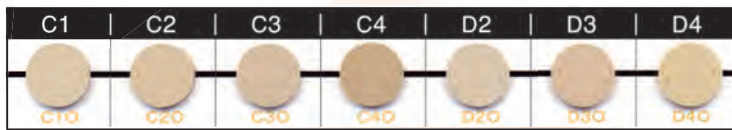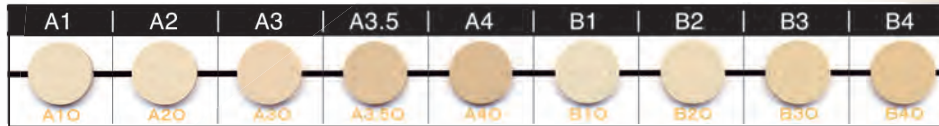

NCC-Farben

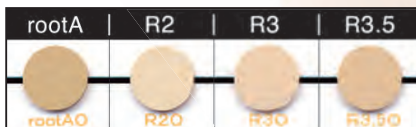

Effect-Farben




Sicherer Verbund zu jeder Legierung


Universal Opaque bildet mit dem Bonding M. L. Primer eine abgestimmte Symbiose für einen dauerhaften und sicheren Verbund. Diese Vernetzungen sind speziell bei edelmetallhaltigen Legierungen äußerst resistent gegen Hydrolyse-Einwirkungen und thermische Belastungen.

Quelle: Poliklinik für zahnärztliche Prothetik- und Werkstoffkunde der Universität Jena, Dr. A. Rzany, 2013

- Druck-Scherfestigkeit zu Edelmet. red. Leg. AuroLloyd KF nach 24 Stunden Lag. in dest. Wasser bei 37° C

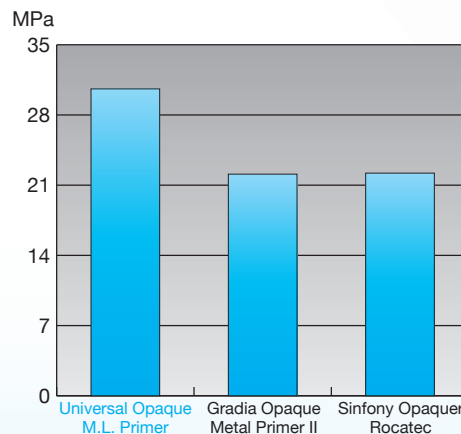

- Druck-Scherfestigkeit zu Edelmet. red. Leg. AuroLloyd KF nach 25.000 Temperaturlastwechseln

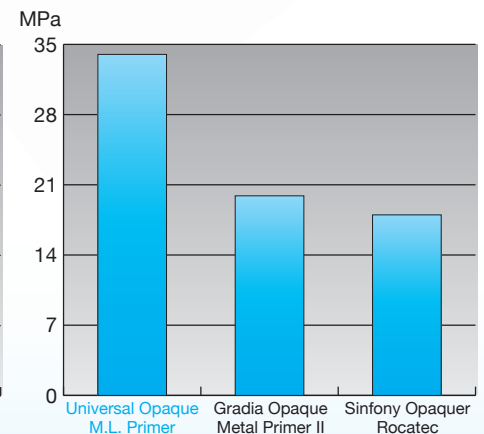

Systemkomponenten



Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque ist sehr fließfähig und bewirkt eine feste Anbindung zur Legierung und den Universal Pastenopakern.



Universal Opaque

Universal Pastenopaker sind leicht aufzutragen und für das CERAMAGE wie für das SOLIDEX System anzuwenden



SOLIDEX 8-Farben-Set

Für den Einstieg in die SOLIDEX Technik in den V-Farben A1 bis A4, B2, B3 und C3



CERAMAGE 8-Farben-Set

Alle Komponenten für die Herstellung ästhetischer Restaurationen in den V-Farben A1 bis A4, B2 und B3 sowie C3 in einer praktischen Ständerbox



M.L. Primer

Sicherer Verbund auf allen Dentallegierungen



CRB - Cerarasin Bond

Das bewährte Verbundsystem zu licht- und selbsthärtenden Kunststoffen und allen keramischen Verblendmaterialien



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
 SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
 SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
 SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
 SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
 SHOFU DENTAL GmbH [EC REP] Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.



www.shofu.de